 <p>Groene Hart Ziekenhuis Open voor iedereen</p> <p>Medische Microbiologie</p>	Inzenden materialenkaart	Doc. code: MMB-ALG-PR-032BY01 Versie: 11.0 Geldig vanaf: 09-jan-2021 Revisie: jan-2024 Pagina: 1 van 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Algemeen

Bij vragen over afname of specifieke onderzoeken altijd vóór afname eerst 0182-505070 bellen voor overleg.

Bij CITO en bijzondere aanvragen (o.a. Malaria en prikaccidenten) graag bellen met de dienstdoende arts-microbioloog;

- Op werkdagen tijdens kantooruren: 0182-505080
- Buiten reguliere kantooruren, via de centrale: 0182-505050

Voor doorlooptijden medische microbiologische uitslagen: [klik hier](#)


## Veiligheid

Alle patiënten materialen dienen als potentieel besmettelijk beschouwd te worden.









## Verpak en verzend instructies

- Voorzie het in te zenden materiaal van patiëntgegevens en vul het aanvraagformulier in. (Voor invulinstructies; [klik hier](#)).
- Voorzie het aanvraagformulier en/of het in te zenden materiaal van de afnamedatum
- Verpak het in te zenden materiaal in een safetybag voorzien van voldoende adsorptiemateriaal. Materiaal dat niet lekvrij is verpakt kan niet worden geaccepteerd.
- Verstuur het materiaal met de GHZ logistiek of geef deze af op een van de afgiftepunten.

Materialen die langer onderweg zijn dan gestelde bewaartermijnen kunnen niet in behandeling genomen worden voor onderzoek.













## Afname en bewaar instructies









Onderzoek	Afnamemateriaal	Hoeveelheid	Bewaarcondities
<ul style="list-style-type: none"> <li>Abces</li> </ul>	Steriel potje, witte deksel  of spuit, afgedopt (zonder naald!)  Σ-transwab paarse dop Wattenstok in medium laten zitten Geen gram en/of TBC kweek mogelijk 	2-25 ml.	Koelkast, max 24 uur
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ascites</li> </ul>	Steriel potje, witte deksel 	2-25 ml.	Koelkast, max 24 uur
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bacteriële vaginose (Nugentscore) Ongefixeerd uitstrijkpreparaat, aan de lucht gedroogd, zonder dekglasje.</li> </ul>	Objectglasje ( in preparaatdoosje) 	n.v.t	Kamertemperatuur
<ul style="list-style-type: none"> <li>BAL/bronchusspoelsel</li> </ul>	Steriel potje, witte deksel 	2-25 ml	Koelkast, max 24 u
<ul style="list-style-type: none"> <li>Beenmerg Banale kweek</li> </ul>	Bloedkweek set  Groen= aerob  Oranje= Anaerob	2x5 ml	Kamertemperatuur, max 16 uur

Dit is een niet beheerd document en is geldig tot 24 uur na printen, tenzij voorzien van paraaf door kwaliteitsfunctionaris. Een geldig, getekend exemplaar is voorhanden bij de kwaliteitsfunctionaris.












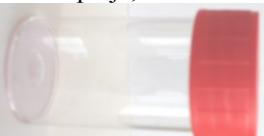

Onderzoek	Afnamemateriaal	Hoeveelheid	Bewaarcondities
• Beenmerg TBC onderzoek	EDTA buis, 	5 ml	Koelkast, max 24 uur
• Biopt	Steriel potje, rode deksel Met steriel fysiologisch zout 	n.v.t.	Koelkast, max 24 uur
• Blaasje uitstrijk voor Herpes/ Varicella	Σ-transwab paarse dop  Wattenstok in medium laten zitten	n.v.t.	Koelkast, max. 24 uur
• Bloed	Bloedkweek set  Groen= aerob  Oranje= Anaerob	2x10 ml	Kamertemperatuur, max 16 uur
• Bloed (voor afname bij kinderen of moeilijk te prikken patiënten)	Bloedkweek pediBact 	1x5 ml	Kamertemperatuur, max 16 uur
• Buikvocht	Steriel potje, witte deksel 	2-25 ml.	Koelkast, max 24 uur
• BRMO/ESBL rectumkweek	Σ-transwab met paarse dop  Wattenstok in medium laten zitten	n.v.t.	Koelkast, max. 24 uur
• CAPD vloeistof	CAPD zak  Goed afsluiten	1x	Koelkast, max 24 uur




Onderzoek	Afnamemateriaal	Hoeveelheid	Bewaarcondities
<ul style="list-style-type: none"> <li>Katheter-, en draintips</li> </ul>	Steriel potje, witte deksel 	5 cm van de tip	Koelkast, max 24 uur
<ul style="list-style-type: none"> <li>CMV en EBV (PCR) volbloed plasma</li> </ul>	EDTA buis, paarse dop, 10 ml 	10 ml bloed	Koelkast, max 24 uur
<ul style="list-style-type: none"> <li>Feces               <ul style="list-style-type: none"> <li>PCR op bacteriële verwekkers en Clostridium</li> <li>Viraal (EHEC, E.coli O157, Noro)</li> <li>Parasieten (wormen, wormeieren, cysten)</li> <li>Schistosoma, Strongyloides</li> </ul> </li> </ul>	Fecespotje, bruin deksel, lepel 	Potje $\frac{3}{4}$ gevuld	Koelkast, max. 24 uur
<ul style="list-style-type: none"> <li>Feces Helicobacter antigeen</li> </ul>	Fecespotje, bruin deksel, lepel 	Potje $\frac{3}{4}$ gevuld	Direct insturen, of invriezen bij -20°C tot moment van insturen
<ul style="list-style-type: none"> <li>Feces Parasitair onderzoek (wormen, wormeieren, cysten, amoeben, <u>vegetatieve vormen</u>, trofozoieten, oöcysten)</li> </ul>	TFT set 	(zie afname instructies in TFT set.)	Koelkast, max. 4 dagen
<ul style="list-style-type: none"> <li>Gal</li> </ul>	Steriel potje, witte deksel 	2-25 ml.	Koelkast, max 24 uur
<ul style="list-style-type: none"> <li>Genitaalkweek ♀ cervix, vagina, urethra, anus</li> <li>Genitaalkweek ♂ penis, urethra, anus</li> </ul>	Σ-transwab met paarse dop  Wattenstok in medium laten zitten of Σ-transwab met oranje dop  met dunne flexibele wat Wattenstok in medium laten zitten	n.v.t.	Koelkast, max. 24 uur










Dit is een niet beheerd document en is geldig tot 24 uur na printen, tenzij voorzien van paraaf door kwaliteitsfunctionaris. Een geldig, getekend exemplaar is voorhanden bij de kwaliteitsfunctionaris.




Onderzoek	Afnamemateriaal	Hoeveelheid	Bewaarcondities
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Genitaalkweek ♀ of ♂ GO</li> </ul>	<p>Σ-transwab met paarse dop</p>  <p>Wattenstok in medium laten zitten of Σ-transwab met oranje dop</p>  <p>met dunne flexibele wat Wattenstok in medium laten zitten</p>	n.v.t.	Kamertemperatuur, kweek moet binnen 6 uur op het laboratorium zijn
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Genitaaluitstrijk ♀ of ♂ PCR Chlamydia, GO, Trichomonas</li> </ul>	<p>Σ-transwab met paarse dop</p>  <p>Wattenstok in medium laten zitten</p>	n.v.t.	Koelkast, 24-48 uur
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewrichtsvocht</li> </ul>	<p>Steriel potje, witte deksel</p>  <p>of spuit, afgedopt (geen naald!)</p> 	2-25 ml.	Koelkast, max 24 uur
<ul style="list-style-type: none"> <li>• HIV, HBV, HCV (PCR) Volbloed/plasma (Sanquin afname envelop)</li> </ul>	<p>EDTA buis, paarse dop, 10 ml</p> 	10 ml bloed	Koelkast, max 24 uur Lab bellen (0182-50)5070
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Haren, Schimmelkweek</li> </ul>	<p>Steriel potje, rode deksel</p> 	n.v.t.	Kamertemperatuur, max. 24 uur
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Huid- en wondkweken</li> </ul>	<p>Σ-transwab paarse dop</p>  <p>Wattenstok in medium laten zitten</p>	n.v.t.	Koelkast, max. 24 uur
<ul style="list-style-type: none"> <li>• IUD, lochiavocht, placenta, vruchtwater</li> </ul>	<p>Steriel potje, rode deksel</p> 	n.v.t.	Koelkast, max. 24 uur
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keel- neus-, rectumkweken MRSA BRMO (ESBL)</li> </ul>	<p>Σ-transwab met paarse dop</p>  <p>Wattenstok in medium laten zitten</p>	n.v.t.	Koelkast, max. 24 uur

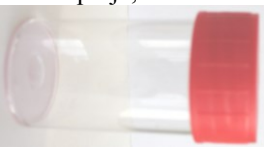








Dit is een niet beheerd document en is geldig tot 24 uur na printen, tenzij voorzien van paraaf door kwaliteitsfunctionaris. Een geldig, getekend exemplaar is voorhanden bij de kwaliteitsfunctionaris.




Onderzoek	Afnamemateriaal	Hoeveelheid	Bewaarcondities
<ul style="list-style-type: none"> <li>Keel- en/of nasopharynxuitstrijk</li> <li>Influenza spoeddiagnostiek</li> <li>RSV spoeddiagnostiek</li> <li>Bordetella PCR (voorkeur nasopharynx)</li> <li>Overige luchtwegen viraal (PCR)</li> <li>(evt. Corona PCR)</li> </ul>	<p>∑-transwab met paarse dop (keel)</p>  <p>∑-transwab met oranje dop (nasopharynx)</p>  <p>met dunne flexibele wat.</p> <p>Wattenstok in medium laten zitten</p>	n.v.t.	Koelkast, max. 24 uur
<ul style="list-style-type: none"> <li>Keel- en nasopharynxuitstrijk</li> <li>Corona PCR</li> </ul>	<p>Buis met VTM en 2x losse swab (nasopharynx en keel)</p> 	n.v.t.	Koelkast, max. 24 uur
<ul style="list-style-type: none"> <li>Keel-, neusuitstrijk</li> <li>Banale kweek</li> <li>Stafylokokken dragerschap</li> </ul>	<p>∑-transwab met paarse dop</p>  <p>Wattenstok in medium laten zitten</p>	n.v.t.	Koelkast, max. 24 uur
<ul style="list-style-type: none"> <li>Perineum/Rectum uitstrijk</li> <li>Stafylokokken dragerschap</li> </ul>	<p>∑-transwab met paarse dop</p>  <p>Wattenstok in medium laten zitten</p>	n.v.t.	Koelkast, max. 24 uur
<ul style="list-style-type: none"> <li>Liquor</li> <li>Banale kweek</li> <li>TBC kweek</li> <li>Gist/schimmelkweek</li> </ul>	<p>Steriele liquorbuis</p> 	0,5-10 ml	35 ± 2°C, max 15 uur. Rechtup bewaren en vervoeren
<ul style="list-style-type: none"> <li>Liquor</li> <li>PCR neurotrope virussen (HSV/VZV entero-, parechovirus)</li> </ul>	<p>Steriele liquorbuis</p> 	1-10 ml	Koelkast, max 24 uur Rechtup bewaren en vervoeren
<ul style="list-style-type: none"> <li>Maaginhoud</li> </ul>	<p>Steriel potje, rode deksel</p> 	2-50 ml	Koelkast, max 24 uur
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mond-, tonguitstrijk</li> <li>Gistkweek</li> </ul>	<p>∑-transwab met paarse dop</p>  <p>Wattenstok in medium laten zitten</p>	n.v.t.	Koelkast, max. 24 uur

Dit is een niet beheerd document en is geldig tot 24 uur na printen, tenzij voorzien van paraaf door kwaliteitsfunctionaris. Een geldig, getekend exemplaar is voorhanden bij de kwaliteitsfunctionaris.


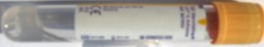








Onderzoek	Afnamemateriaal	Hoeveelheid	Bewaarcondities
• Nagels	Steriel potje, rode deksel 	n.v.t.	Kamertemperatuur, max. 24 uur
• Oog, oor uitstrijk	Σ-transwab met oranje dop  met dunne flexibele wat. Wattenstok in medium laten zitten	n.v.t.	Koelkast, max. 24 uur
• Orthopedisch materiaal	Steriel potje, rode deksel 	n.v.t.	Koelkast, max. 24 uur
• Plakbandpreparaat Onderzoek op Enterobius/aarsmade-Taenia-eieren, oxyuren	Objectglasje (in preparaatdoosje, helder plakband) 	n.v.t.	Kamertemperatuur
• Pleuravocht	Steriel potje, witte deksel 	2-25 ml.	Koelkast, max 24 uur
• Punctaat	Steriel potje, witte deksel  of spuit, afgedopt (dus zonder naald!)  Of Σ-transwab met paarse dop, wattenstok in medium laten zitten. Geen gram en TBC kweek mogelijk. 	2-25 ml.	Koelkast, max 24 uur
• Schilfers Schimmelkweek Malassezia furfur	2 objectglasjes, dichtgetaped 	n.v.t.	Kamertemperatuur, max 24 uur


Dit is een niet beheerd document en is geldig tot 24 uur na printen, tenzij voorzien van paraaf door kwaliteitsfunctionaris. Een geldig, getekend exemplaar is voorhanden bij de kwaliteitsfunctionaris.








Onderzoek	Afnamemateriaal	Hoeveelheid	Bewaarcondities
<ul style="list-style-type: none"> <li>Semen Banale kweek</li> </ul>	Steriel potje, rode deksel 	Gehele lozing	Koelkast, max 24 uur
<ul style="list-style-type: none"> <li>Serum Infectieziekten serologie (HAV, HBV, HCV, HIV, CMV, EBV, Toxoplasma, Rubella, Brucella, kinkhoest, Lyme, Chlamydia, Zika etc)</li> </ul>	Stolbuis, gele dop 10 ml 	10 ml bloed	Koelkast, max 24 uur
<ul style="list-style-type: none"> <li>Sputum Banale kweek Schimmelkweek Legionella: kweek en PCR TBC kweek en PCR Respiratoire viruspakket Atypische verwekkers (mycoplasma, <i>C. pneumoniae</i>, <i>C. psittaci</i>)</li> </ul>	Steriel potje, rode deksel 	2-50 ml.	Koelkast, max 24 uur
<ul style="list-style-type: none"> <li>Urine Banale kweek</li> </ul>	Boorzuurbuis (olijfgroen) 	Zie <a href="#">afname-instructies</a>	max. 72 uur
<ul style="list-style-type: none"> <li>Urine BRMO (ESBL) MRSA Legionella- en/of pneumokokkensneltest</li> </ul>	Steriel potje, witte deksel 	2-25 ml	Koelkast, max 24 u
<ul style="list-style-type: none"> <li>Urine Retrograde ejaculatie</li> </ul>	Steriel potje, witte deksel 	Eerste volledige portie na ejaculatie	Kamertemperatuur, max 16 uur
<ul style="list-style-type: none"> <li>Urine Schistosoma</li> </ul>	4 Steriele potjes, witte deksel 	4x25 ml geproduceerd rond midden vd dag na activiteit of 24 uurs urine	Koelkast, max. 24 uur
<ul style="list-style-type: none"> <li>Urine TBC onderzoek</li> </ul>	4 Steriele potjes, witte deksel 	4x25 ml	Koelkast, max. 24 uur

Dit is een niet beheerd document en is geldig tot 24 uur na printen, tenzij voorzien van paraaf door kwaliteitsfunctionaris. Een geldig, getekend exemplaar is voorhanden bij de kwaliteitsfunctionaris.





Onderzoek	Afnamemateriaal	Hoeveelheid	Bewaarcondities
<ul style="list-style-type: none"> <li>Urine PCR Chlamydia, GO, Trichomonas</li> </ul>	Steriel potje, witte deksel 	0.5ml-25 ml	Koelkast, max 24 uur
	Of Boorzoumbuis (olijfgroen) 		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Weefsel</li> </ul>	Steriel potje, rode deksel 	n.v.t.	Koelkast, max 24 uur

